

Rutinas Diarias

Notas

POR LA MAÑANA



Encender la bomba

1. Sacar un nuevo cartucho de la nevera (5 minutos antes)
2. Conectar cartucho a bomba. Fijar con llave conectora o moneda.
3. Quitar **TAPÓN ROJO** del cartucho y abrir la **PINZA BLANCA**.
4. Conectar bomba a sonda.
5. Pulsar 3 segundos . Esperar a ver **“PARADA”** en pantalla.
6. Pulsar 3 segundos . Esperar a ver **“FUNC”** en pantalla.
7. Pulsar **2 VECES** . Se verá en pantalla **“DOSIS MATUTINA”**.

Al finalizar, la bomba administra automáticamente la dosis continua y aparece **“FUNC”** en pantalla.

Durante el día



Siguiendo las instrucciones de tu médico, si consideras que necesitas alguna dosis extra durante el día:

Pulsar 1 vez DOSIS EXTRA

POR LA NOCHE*



Apagar la bomba

1. Pulsar  hasta que aparezcan **3 líneas**.
En pantalla aparecerá **"PARADA"**.
2. Pulsar  hasta que aparezcan las **3 líneas**.
La pantalla **quedará vacía**.
3. Desconectar bomba de sonda, cerrar con el tapón de la sonda y desechar cartucho.

Lavar la sonda

Con agua potable a temperatura ambiente.

- Usar jeringa de 5 ml y un conector.
- **5 veces** por cada tapón.

Cuidados del estoma

Una vez que la herida del estoma haya cicatrizado (después de aproximadamente 15 días)

1. Suelta el triángulo de retención externo.
2. Lavar el estoma con agua y jabón.
3. Mueve la sonda hacia dentro y hacia fuera 2-3 cm.
No gires la sonda.
4. Colocar triángulo de retención externo a **0.5-1 cm de la piel**.
5. Dejar la zona al aire, siempre limpia y seca.

* Si está medicamente justificado, el tratamiento puede administrarse durante 24 horas.

EN LA DUCHA





Los líquidos y el agua pueden dañar la bomba. Desconectar la bomba antes de ducharte o bañarte.

El sistema de sondas se puede mojar.

1. Pulsar  hasta que aparezcan **3 líneas**.
En pantalla aparecerá **"PARADA"**.
2. Desconectar la sonda de la bomba y cerrar con el tapón de la sonda.
3. Después de la ducha, volver a conectar la sonda a la bomba.
4. Pulsar  hasta que aparezcan **3 líneas**.
La bomba se autochequeará y aparecerá en pantalla **"FUNC"**.

RECUERDA

Guardar medicación en **NEVERA**

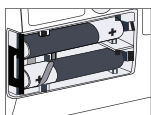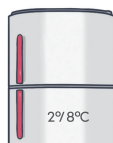

Cambio **SEMANAL** de pilas:
2 pilas AA no recargables

En caso de incidencia o cualquier consulta llamar al
900 922 522.

Servicio técnico de dispositivos de infusión atendido por profesionales de enfermería.