

RUTINA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA MEDICACIÓN

1

PREPARACIÓN DE LA MEDICACIÓN




Lávese las manos con agua y jabón y séquelas con una toalla de papel




Retire el tapón de plástico del vial



Limpie la parte superior del vial con una toallita con alcohol y dejelo secar

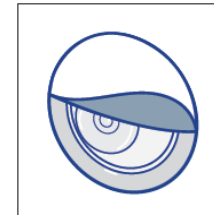

Retire la cubierta de papel del envase del adaptador del vial

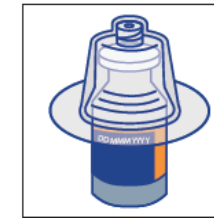


Sujetándolo por el envase, coloque el adaptador del vial sobre el vial hasta que encaje




Una vez encajado el adaptador, retire el envase

2


CARGA DE LA JERINGA

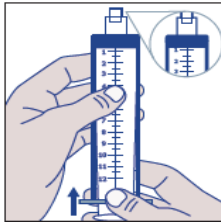


Abra una jeringa nueva y empuje el émbolo para vaciar el aire de la jeringa por completo

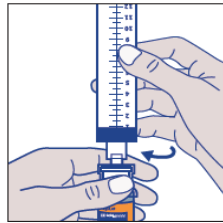


Enrosque la jeringa boca abajo sobre el adaptador del vial

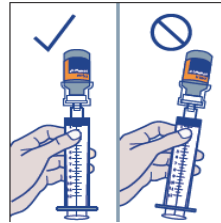


Coloque la jeringa hacia arriba, recta, con el vial encima

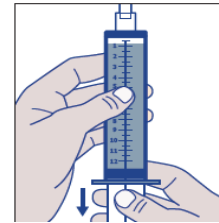

Tire del émbolo de la jeringa para extraer toda la solución del vial a la jeringa

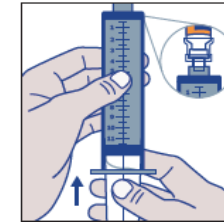


Compruebe si hay burbujas de aire en la jeringa, las burbujas grandes deben retirarse

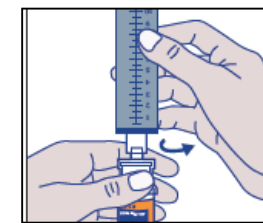


Coloque la jeringa boca abajo para desconectarla del adaptador del vial

3

CARGAR E INICIAR LA BOMBA

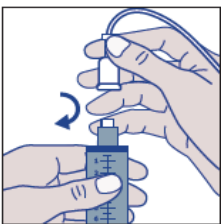


Abra un nuevo equipo de perfusión y conecte el tubo a la jeringa que acaba de preparar

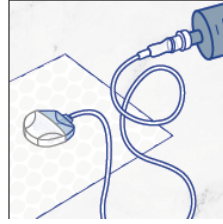


Mientras lo conecta a la jeringa, coloque el otro extremo del tubo de perfusión sobre una toalla de papel




Encienda la bomba, seleccione "Menu" y a continuación, seleccione la opción "introducir jeringa"

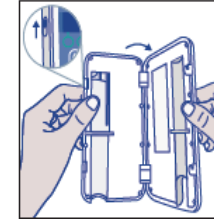

Deslice el pestillo de la tapa para desbloquear y abrir la tapa de la bomba

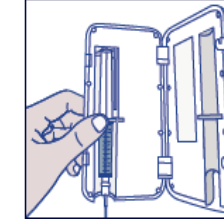


Introduzca la jeringa en la bomba. La jeringa debe encajar en la muesca de la bomba sin ofrecer mucha (o ninguna) resistencia

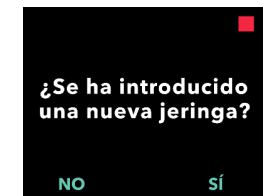


Cierre la tapa de la bomba y confirme que se ha introducido una nueva jeringa.

4


CEBADO DEL TUBO DE PERFUSIÓN

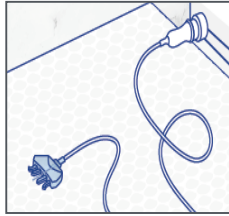


Coloque el conector del tubo de perfusión sobre una toallita de papel limpia. (*Guarde el tapón protector)

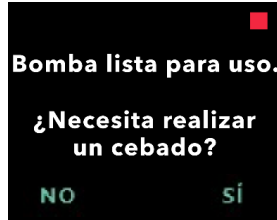


Vuelva a la pantalla de la bomba y seleccione "SÍ" para comenzar el cebado.

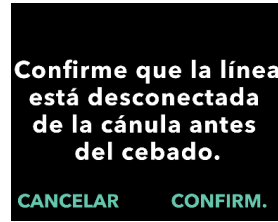


Compruebe que la aguja del tubo de perfusión NO esté conectada a la cánula y pulsando "Confirm"

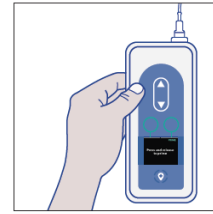


Sostenga la bomba con la punta de la jeringa orientada hacia arriba

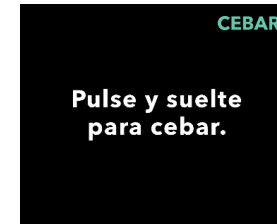

Pulse "cebar" a intervalos hasta ver una gota de solución salir a través del conector del tubo de perfusión

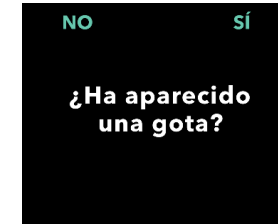


Pulse "SÍ" cuando haya visto la gota salir

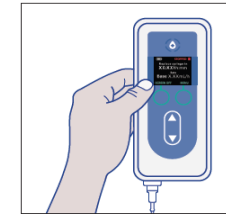


Vuelva a colocar la bomba en su orientación original. Compruebe que no gotea solución.

5


COLOCACIÓN DE LA CÁNULA

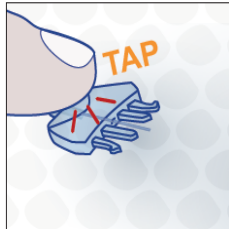


Antes fijar el conector a la cánula, compruebe que no han quedado gotas en la punta, con un ligero golpe

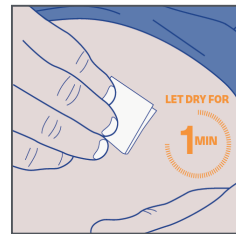


Seleccione el lugar de administración. Limpie el lugar de perfusión con una toallita con alcohol y deje secar la piel.

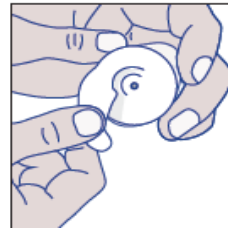


Retire el papel de la parte inferior del equipo de perfusión, asegurándose de no tocar la parte adhesiva.

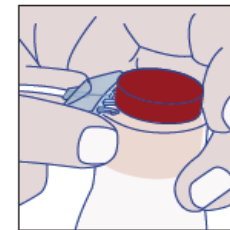

Retirar tapon protector del dispositivo de inserción cerca del botón rojo, sujetándolo por los bordes y tirando hacia fuera. (*Guardelo)

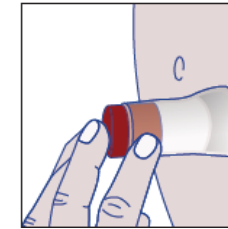


Coloque el dispositivo de inserción en el el lugar de administración. Apriete el botón rojo hasta que oiga un "clic". Espere 5 segundos antes de retirar el dispositivo.

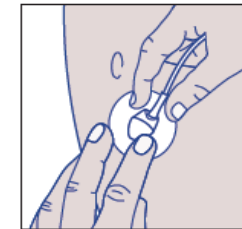


Conecte el conector del tubo de perfusion a la cánula. Debe escuchar un "clic" si está correctamente conectado.

6


ADMINISTRACIÓN DEL TRATAMIENTO

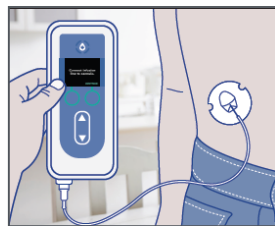


Para iniciar la perfusion, consulte la pantalla de la bomba.

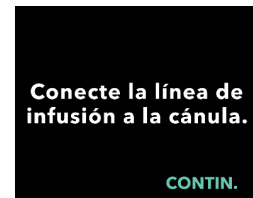

Confirme que el tubo del equipo de perfusión está conectada a la cánula. Pulsar "contin"

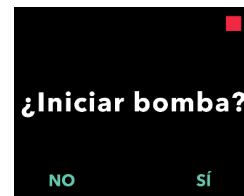

Inicie la bomba con una dosis de carga si procede o dosis continua. Seleccione "SÍ".

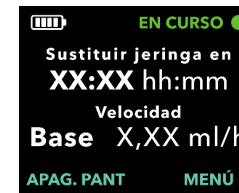

En la pantalla de la bomba aparecerá la notificación "en curso" en el la esquina superior derecha confirmando que la administración se ha iniciado.

* Guarde los tapones protectores del equipo de perfusión, el de la cánula y el del tubo. Puede volver a necesitarlos si desconecta temporalmente la bomba.

Prospecto de Duodopa240mg/ml + 12 mg/ml solución para perfusión (foslevodopa/foscarbidopa) disponible en https://cima.aemps.es/cima/dochtml/p/88677/P_88677.html Instrucciones de uso de la bomba VYAFUSER™ para pacientes